


Kundejournal

DE NYE HULLER PLACERES HER:



Udfyld kundejournalen og den øverste del af plejerådet. Riv slippen af og giv kunden det skriftlige plejeråd. Kunden godkender vilkårene ved at signere denne kundejournal, som du herefter arkiverer.

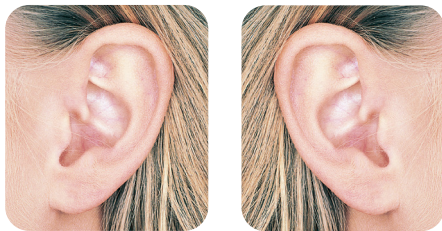

ØREPIERCING FORETAGET:

.....

DATO

AF

.....

STER LOT

ART. NR./REF

Jeg har modtaget skriftlige plejeråd, og jeg godkender hermed betingelserne i disse og bekræfter, at der ikke er helbredsmæssige forhindringer (se bagsiden af plejerådene) for, at jeg kan gennemføre ørepiercingen. Jeg accepterer, at mine personlige oplysninger gemmes i 1 år grundet hensynet til produktsporbarhed.

.....

KUNDENS/VÆRGES UNDERSKRIFT

.....

NAVN MED BLOKBOGSTAVER

.....

E-MAIL

.....

MOBIL



Plejeråd

.....

DATO FOR PIERCING

.....

DATO FOR GENBESØG

.....

STER. LOT.

.....

ART. NR./REF

VILKÅR:

- Jeg er mindst 18 år. Hvis dette ikke er tilfældet skal en væрге godkende vilkårene.
- Jeg/en mindreårig har ingen helbredsmæssige forhindringer, (se bagsiden af plejerådene), som betyder at man bør undlade at foretage en ørepiercing.
- Blomdahl piercingsmykker er udviklede i samarbejde med hudlæger, så de passer til alle, selv til dig som allerede har nikkelallergi. Du vælger mellem nøje udvalgt medicinsk plastik (0% nikkel) og ren medicinsk titan. Yderbelægningen findes udelukkende på de områder af smykket, som ikke er i kontakt med huden. Piercingsmykkerne er desuden designet med henblik på at opnå det bedste helingsresultat.
- Medicinsk piercing fra Blomdahl bygger på en moderne aseptisk teknik fra sundhedsvæsenet, hvilket indebærer, at produkter og metoder er udviklede, så der undgås spredning af infektioner ved selve piercingen. Jeg er dog medvidende om, at hullet efter piercingprocessen er mit eget/værges ansvar. Et nylavet hul i øret er et lille sår. Derfor er det vigtigt at tage rigtig hånd om det under selve helingsperioden, så der ikke opstår infektion. Jeg er også klar over, at en piercing i den øverste del af øret kan udgøre en større risiko for infektion, og at helingen kan tage længere tid end i den bløde del af øret. Ved at følge plejerådene minimerer jeg risikoen for infektion.



BLOMDAHL

www.blomdahl.dk

PLEJERÅD – VIGTIG INFORMATION

1. Rør aldrig ørene med urene hænder.
2. Rengør dine nylavede huller i ørene (for- og bagside) grundigt både morgen og aften. Lad øreringene sidde i selv ved rengøring. Rengør med flydende sæbe, og skyl grundigt med rindende, rent vand. Tør af med rent papir eller en ren vatpind. Alternativt kan du rengøre med Blomdahl Piercing Aftercare rengøringservietter, som er skånsomme mod huden. Med disse kan du rengøre mellem øre og smykke/lås. Lad hullerne lufttørre. Anvend en ny serviet for hvert øre og ved hver rengøring. OBS! Rengør ikke med sprit eller alkohol.
3. Sørg for, at der altid er rent, tørt og luftigt omkring det nylavede hul.
4. Dæk ørene, når du anvender hårspray, parfume, sminke, hårfarvningsprodukter m.m.
5. Vær ekstra forsigtig, når du tager tøj over hovedet, så øreringene ikke sidder fast i tøjet.
6. Hvis du bader i bassin, sø eller hav: Vent med at bade så længe som muligt og undgå at have hovedet under vandet. Efter bad rengøres enten med flydende sæbe og afskylning med rent vand, eller brug Blomdahl Piercing Aftercare rengøringservietter – se punkt 2 herover.
7. **Efter ca 6 uger (brusk ca 12 uger) kan du bytte øreringene ud med andre øreringe. Således fjerner man piercingøreringene:** Vask hænder og ørene grundigt.



Tag fat i smykkedelen på ørets forside. Tag samtidig fat i låsen på ørets bagside med den anden hånd. Vrik herefter låsen i en fast bevægelse frem og tilbage indtil det løsner sig. Tag forsigtigt piercingøreringen ud og sæt rene nye øreringe i.

8. Det tager op til et år inden hullet er helet fuldstændigt, så vær opmærksom på følgende:
 - Gå ikke uden øreringe da hullet kan krympe og/eller vokse sammen igen.
 - Vær forsigtig, når du skifter øreringe. Eftersom den nydannede hud indeni hullet er tynd og skrøbelig, har den let ved at blive beskadiget og der kan derfor let opstå infektion. Rengør derfor altid øreringen og dine hænder inden du skifter øreringe, og fortsat med at holde hullet rent, tørt og luftigt. Bruger du øreringe med lås, bør låsen ikke presses tæt ind mod ørets bagside, da der er risiko for, at låsen kan blive omsluttet af øret.
 - Risikoen for at udvikle kontaktallergi er størst under det første år efter piercingen. Du bør derfor også være ekstra opmærksom i dit valg af øreringe. Vi anbefaler hudvenlige smykker fra Blomdahl – se plejerådets bagside.
 - Fortsæt med at rengøre, og kontroller med jævne mellemrum dine huller gennem hele det første år.

VIGTIGT! Rødme, hævelse, smerte eller udslæt kan være tegn på infektion: Hvis hullet er i den bløde del af øret, dvs. i øreflippen, skal du tage øreringen ud og vaske området. Hvis det ikke er blevet bedre dagen efter skal du tage kontakt til din læge. Hvis hullet er i ørets bruskdel skal du tage øreringen ud, vaske og tage kontakt til din læge med det samme. Sæt ikke piercingøreringen i igen, men lad hullet hele.

Se flere spørgsmål og svar (FAQ) på www.blomdahl.dk

Jeg er opmærksom på, at jeg bør rådføre mig med min læge, før jeg får piercet mine ører, hvis jeg fx har en af følgende tilstande:

- kontaktallergi
- hudsygdom eller eksem, fx psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidligere problemer med sårheling/keloiddannelse
- hjertesygdom eller medfødt hjertefejl
- bærer kendt resistens mod antibiotika, fx MRSA
- tilhører en immunsvag gruppe (inkl. gravide)
- har et implantat/protese
- koagulationsforstyrrelser/tilbøjelighed til blødning/bruger blodfortyndende medicin
- højt eller lavt blodtryk
- epilepsi eller anden neurologisk sygdom
- hepatitis B, C eller HIV

Ved midlertidig infektion/inflammation i kroppen bør du vente med at blive piercet, til du er rask igen.

Jeg er opmærksom på, at jeg bør rådføre mig med min læge, før jeg får piercet mine ører, hvis jeg fx har en af følgende tilstande:

- kontaktallergi
- hudsygdom eller eksem, fx psoriasis
- diabetes
- sår med infektion
- tidligere problemer med sårheling/keloiddannelse
- hjertesygdom eller medfødt hjertefejl
- bærer kendt resistens mod antibiotika, fx MRSA
- tilhører en immunsvag gruppe (inkl. gravide)
- har et implantat/protese
- koagulationsforstyrrelser/tilbøjelighed til blødning/bruger blodfortyndende medicin
- højt eller lavt blodtryk
- epilepsi eller anden neurologisk sygdom
- hepatitis B, C eller HIV

Ved midlertidig infektion/inflammation i kroppen bør du vente med at blive piercet, til du er rask igen.

Smykker, der får dig til at føle dig godt tilpas

Vi hos Blomdahl synes, at alle skal kunne føle sig smukke hver dag. Derfor går vi længere end de fleste og går ekstra meget op i de små detaljer, der gør en stor forskel.

Fra materialer, der er skånsomme mod huden til samvittighedsfuld fremstilling og kvalitet, der holder til det liv, du ønsker at leve. Vi er så omhyggelige med, hvad vi arbejder med, at alle, også dig med hud, der har brug for ekstra omsorg, kan bære smykker fra Blomdahl. Det eneste, du skal tænke på, er, hvad du synes er smukt. For du kan være helt sikker på, at vi allerede har tænkt på alt det andet. Det er en omsorg, du kan glæde dig over, både til hverdag og til fest.



Nemt at rengøre

Hold dine nypiercede ører rene ved at bruge Blomdahl Piercing Aftercare rengøringssservietter:

- Nemme at bruge
- Nemt at rengøre mellem øre og smykke/lås
- Skånsomme mod huden
- Helt fri for alkohol

Digitale plejeråd



BLOMDAHL
FEELGOOD JEWELLERY

www.blomdahl.dk

