


# Kundenjournal

HIER WURDEN DIE NEUEN LÖCHER GESTOCHEN:



Fülle das Kundenjournal und den oberen Bereich der Pflegeanweisungen aus. Reiße ihn ab und gib dem Kunden/der Kundin die schriftlichen Pflegeanweisungen. Der Kunde/die Kundin erklärt sich mit den Bedingungen einverstanden, indem er/sie dieses Kundenjournal unterschreibt, das anschließend archiviert wird.

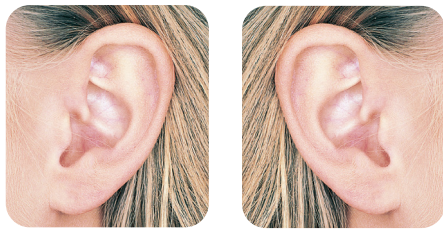

OHRLOCHSTECHEN DURCHGEFÜHRT:

DATUM

VON

STER LOT

ART.-NR./REF

Ich habe die schriftlichen Pflegeanweisungen erhalten, erkläre mich hiermit mit den darauf angegebenen Bedingungen einverstanden und bestätige, dass dem Ohrlochstechen aus medizinischer Sicht nichts entgegensteht (siehe Rückseite der Pflegeanweisungen). Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Produktrückverfolgbarkeit ein Jahr lang gespeichert werden.

UNTERSCHRIFT KUND:IN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R

NAME IN BLOCKSCHRIFT

E-MAIL-ADRESSE

MOBILNUMMER

## Pflegeanweisungen

DATUM DES OHRLOCHSTECHENS    DATUM FÜR DIE NACHKONTROLLE    STER LOT    ART.-NR./REF

BEDINGUNGEN:

- Ich bin mindestens 18 Jahre alt. Wenn ich minderjährig bin, muss sich mein:e Erziehungsberechtigte:r mit den Bedingungen einverstanden erklären.
- Ich/der oder die Minderjährige sind völlig gesund und dem Ohrlochstechen steht aus medizinischer Sicht nichts entgegen (siehe Rückseite der Pflegeanweisungen).
- Die Erstohrstecker von Blomdahl wurden in Rücksprache mit Dermatolog:innen entwickelt, damit sie für alle geeignet sind, auch für Menschen, die bereits gegen Nickel allergisch sind. Du hast die Wahl zwischen sorgfältig ausgewähltem medizinischem Kunststoff (0 % Nickel) oder rein medizinischem Titan. Die Beschichtung befindet sich nur auf den Teilen des Ohrsteckers, die nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Die Erstohrstecker sind außerdem so konzipiert, dass sie die Heilung optimal unterstützen.
- Das medizinische Ohrlochstechen nach der Methode von Blomdahl basiert auf einer modernen aseptischen Technik aus dem Gesundheitswesen. Das bedeutet, dass die Produkte und Verfahren so konzipiert sind, dass sie die Verbreitung von Infektionskrankheiten beim Ohrlochstechen vermeiden. Ich nehme jedoch zur Kenntnis, dass die Ohrlöcher nach dem Ohrlochstechen meiner Verantwortung / der Verantwortung meines/meiner Erziehungsberechtigten unterliegen. Ein neu gestochenes Ohrloch ist eine kleine Wunde. Deshalb ist es wichtig, es während der Heilungszeit richtig zu pflegen, damit es sich nicht entzündet. Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass ein Piercing im oberen Teil des Ohres ein höheres Infektionsrisiko birgt und dass die Heilungszeit länger ist als für Ohrlöcher im weichen Teil des Ohres. Indem ich die Pflegeanweisungen befolge, verringere ich das Infektionsrisiko.



## BLOMDAHL

www.blomdahl.com

### PFLEGEANWEISUNGEN – WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Berühre deine Ohren niemals mit schmutzigen Händen.
2. Reinige die frisch gestochenen Ohrlöcher morgens und abends gründlich (sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite der Ohren). Nimm die Ohrstecker nicht heraus, auch nicht während des Reinigens. Reinige die Ohrlöcher mit Flüssigseife und spüle die Seife gründlich unter sauberem fließendem Wasser ab. Trockne die Ohren mit sauberem Küchenpapier oder sauberen Wattestäbchen ab. Alternativ kannst du deine Ohrlöcher mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare\* reinigen, die sanft zur Haut sind. Mit den Reinigungstüchern kannst du auch die Zwischenräume zwischen Ohr und Ohrstecker/Verschluss reinigen. Lass die Ohren an der Luft trocknen. Verwende für jedes Ohr und bei jeder Reinigung ein frisches Reinigungstuch. Hinweis! Nicht mit Alkohol reinigen.
3. Sorge dafür, dass die Umgebung um die frisch gestochenen Ohrlöcher immer sauber, trocken und gut belüftet ist.
4. Decke die Ohren ab, wenn du Haarspray, Parfüm, Make-up, Haarfärbemittel o. ä. verwendest.
5. Sei besonders vorsichtig, wenn du Kleidungsstücke über den Kopf ziehst, sodass du mit den Ohrsteckern nicht an deinen Kleidern hängen bleibst.
6. Baden in einem Schwimmbecken, einem See oder im Meer: Warte solange wie möglich damit und vermeide es, den Kopf unter Wasser zu tauchen. Reinige die Ohrlöcher nach dem Baden entweder mit Flüssigseife (und spüle sie anschließend mit sauberem Wasser ab) oder mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare, siehe Punkt 2 oben.
7. **Nach etwa sechs Wochen (bei Piercings am Knorpel etwa zwölf Wochen) kannst du zu anderen Ohrhingen wechseln. So entfernst du den Erstohrstecker:** Wasche die



- Hände und die Ohren gründlich. Fasse den Schmuck an der Vorderseite des Ohrs. Fasse mit der anderen Hand den Verschluss an der Rückseite des Ohrs. Ruckele an dem Verschluss, bis er sich löst. Nimm den Erstohrstecker vorsichtig heraus und setze einen sauberen Ohrhring ein.
8. Die vollständige Heilung der Ohrlöcher dauert bis zu einem Jahr, daher solltest du folgende Hinweise beachten:
    - Trage immer Ohrhinge, da die Löcher sonst kleiner werden und/oder zuwachsen können.
    - Sei beim Wechsel der Ohrhinge vorsichtig. Die Haut, die sich in den Löchern gebildet hat, ist dünn und empfindlich, daher kann sie leicht verletzt werden und sich infizieren. Säubere die Ohrhinge und Hände vor dem Wechseln und achte darauf, dass die Umgebung um die Ohrlöcher sauber, trocken und gut belüftet ist. Wenn du Ohrhinge mit Verschluss verwendest, sollte der Verschluss nicht fest gegen die Rückseite des Ohrs drücken, da sonst das Risiko besteht, dass der Verschluss in das Ohr einwächst.
    - Durch das Ohrlochstechen wird die Haut besonders empfindlich und das Risiko für Kontaktallergien ist während des ersten Jahres am höchsten. Deshalb solltest du deine Ohrhinge sorgfältig wählen. Wir empfehlen hauffreundlichen Schmuck von Blomdahl – siehe Rückseite der Pflegeanweisungen.
    - Reinige und kontrolliere deine Ohrlöcher während des ersten Jahres weiterhin regelmäßig

**WICHTIG!** Die folgenden Anzeichen deuten auf eine Infektion hin: Rötung, Schwellung, Schmerzen und/oder Ausschlag. Wenn das Piercing am weichen Teil des Ohrs, dem Ohrläppchen, gestochen wurde, nimm den Erstohrstecker heraus und wasche die Stelle. Wenn nach dem Aufwachen am nächsten Tag noch keine Besserung eingetreten ist, suche ärztliche Hilfe auf. Wenn sich das Piercing am Knorpel befindet, nimm den Erstohrstecker heraus, wasche die Stelle und suche unmittelbar ärztliche Hilfe auf. Setze den Erstohrstecker nicht wieder ein, sondern lasse das Loch heilen und zuwachsen.

\*Dort erhältlich, wo du deine Ohrlöcher hast stechen lassen.

Weitere Fragen und Antworten findest du unter [www.blomdahl.com](http://www.blomdahl.com)

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich vor dem Ohrlochstechen ärztlichen Rat einholen sollte, wenn beispielsweise eine der unten stehenden gesundheitlichen Einschränkungen auf mich zutreffen:

- Kontaktallergie,
- Hauterkrankung oder Ekzem, z. B. Schuppenflechte,
- Diabetes,
- infizierte Wunde,
- frühere Probleme bei der Wundheilung / Keloidbildung,
- Herzerkrankung oder angeborener Herzfehler,
- Träger:in antibiotikaresistenter Bakterien, z. B. MRSA,
- ich gehöre einer immunschwachen Gruppe an (einschl. Schwangere),
- ich habe ein Implantat / eine Prothese,
- Blutgerinnungsstörungen / Hämophilie / ich verwende gerinnungshemmende Medikamente,
- hoher oder niedriger Blutdruck,
- Epilepsie oder eine andere neurologische Erkrankung,
- Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV.

Bei einer vorübergehenden Infektion/Entzündung solltest du mit dem Ohrlochstechen warten, bis du wieder gesund bist.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich vor dem Ohrlochstechen ärztlichen Rat einholen sollte, wenn beispielsweise eine der unten stehenden gesundheitlichen Einschränkungen auf mich zutreffen:

- Kontaktallergie,
- Hauterkrankung oder Ekzem, z. B. Schuppenflechte,
- Diabetes,
- infizierte Wunde,
- frühere Probleme bei der Wundheilung / Keloidbildung,
- Herzerkrankung oder angeborener Herzfehler,
- Träger:in antibiotikaresistenter Bakterien, z. B. MRSA,
- ich gehöre einer immunschwachen Gruppe an (einschl. Schwangere),
- ich habe ein Implantat / eine Prothese,
- Blutgerinnungsstörungen / Hämophilie / ich verwende gerinnungshemmende Medikamente,
- hoher oder niedriger Blutdruck,
- Epilepsie oder eine andere neurologische Erkrankung,
- Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV.

Bei einer vorübergehenden Infektion/Entzündung solltest du mit dem Ohrlochstechen warten, bis du wieder gesund bist.

## Schmuck, mit dem du dich wohlfühlst

Uns bei Blomdahl ist es wichtig, dass sich alle jeden Tag schön fühlen können. Deshalb gehen wir einen Schritt weiter als die meisten und legen besonders viel Wert auf die Details, die den großen Unterschied machen.

Von hautverträglichen Materialien über eine verantwortungsvolle Fertigung bis hin zu einer Qualität, die deinem Lebensstil standhält. Wir nehmen es mit unserer Arbeit so genau, damit auch Menschen mit empfindlicher Haut den Schmuck von Blomdahl tragen können. Du musst dir nur darüber Gedanken machen, was dir gefällt. Denn an alles andere haben wir schon gedacht – da kannst du dir ganz sicher sein. Bei uns steht nämlich dein Wohlbefinden im Mittelpunkt und mit diesem Bewusstsein kannst du dich wohlfühlen, sowohl im Alltag als auch an Festtagen.



### Einfache Reinigung

Mit den Reinigungstüchern Blomdahl Piercing Aftercare hältst du deine frisch gestochenen Ohrlöcher ganz einfach sauber:

Einfache Anwendung

Auch die Reinigung der Zwischenräume zwischen Ohr und Ohrstecker / Verschluss ist ganz leicht

Sanft zur Haut  
Ohne Alkohol

**BLOMDAHL**  
FEELGOOD JEWELLERY

[www.blomdahl.com](http://www.blomdahl.com)

