



Kundjournal

NÄSHÅLTAGNINGEN UTFÖRD:

DATUM AV

STER LOT ART NR/REF

Jag har fått ett skriftligt skötselråd och jag godkänner härmed villkoren i detta, samt samtycker till att mina personuppgifter sparas i max 1 år p g a produktspårbarhet.

KUNDENS/MÅLSMANS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EMAIL

MOBIL



7 330981 340417

ART NR 301-0201 REV 1.5 (2021.2)

Fyll i kundjournalen och övre delen av skötselrådet. Riv av och ge kunden det skriftliga skötselrådet. Kunden godkänner villkoren genom att signera på denna kundjournal, vilken sedan arkiveras.


Skötselråd

DATUM FÖR HÅLTAGNINGEN

TID OCH PLATS FÖR ÅTERBESÖK

VILLKOR:

- Jag är minst 18 år. Om inte, ska målsman godkänna villkoren.
- Jag/minderårig är fullt frisk och har inte några åkommor som gör att man bör avstå från nashåltagning.
- Blomdahl håltagningssmycken för näsa är utvecklade i samråd med hudläkare, för att passa alla. Även dig som redan har nickelallergi. Nässmyckena är tillverkade av ren medicinsk titan och ytbeläggningen finns enbart på de delar av smycket som inte kommer i kontakt med huden. Håltagningssmyckena är dessutom designade för bästa läkning.
- Medicinsk håltagning från Blomdahl bygger på modern, aseptisk teknik från sjukvården. Det innebär att produkter och metoder är utformade för att undvika spridning av infektioner vid själva håltagningstillfället. Jag är dock medveten om att hålet efter håltagningstillfället är mitt eget/målsmans ansvar. Ett nyttaget hål i näsan är ett litet sår. Därför är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt under läkningsperioden, så att det inte blir infekterat. Genom att följa skötselrådet minimerar jag risken för infektion.

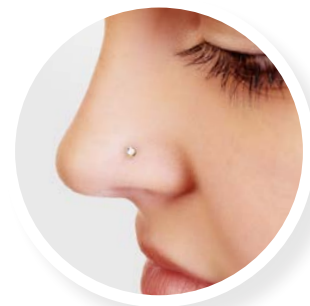

BLOMDAHL

www.blomdahl.se

SKÖTSELRÅD – VIKTIG INFORMATION

1. Vidrör aldrig nässmycket med orena händer. Peta aldrig inuti näsan.
2. Rengör ditt nytagna hål på näsans utsida morgon och kväll. Låt nässmycket sitta i, även vid rengöring.
 - Vid dusch/hårtvätt, använd flytande tvål och skölj noga med rinnande rent vatten. Torka torrt med rent papper eller ren tops.
 - Övrig rengöring görs med Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter, som är skonsamma mot huden. Med dessa kommer du åt att rengöra mellan smycke och hud på näsans utsida. Låt lufttorka. Använd en ny servett vid varje rengöringstillfälle.
3. Se till att det alltid är rent, torrt och luftigt runt det nytagna hålet.
4. Täck näsan när du använder smink, parfym, etc.
5. Det finns inte något lås inne i näsan, utan endast en olivformad spets som ger ett visst skydd mot att nässmycket ska glida ut under läkningstiden. Beroende på hur mycket svullnad som uppkommer inne i näsan kan dock nässmycket vilja börja glida ut. I så fall ska du med rentvättat finger trycka in smycket igen. Var extra försiktig när du drar kläder över huvudet, när du tvättar och torkar dig i ansiktet och när du snyter dig. När du sover rekommenderas ett plåster som skydd över nässmycket.
6. Eftersom du har en vass spets inne i näsan bör du undvika aktiviteter som kan medföra våld mot näsan.
7. Vid bad i bassäng, sjö eller hav: Vänta med att bada så länge som möjligt och undvik att ha huvudet under vattnet. Efter bad, rengör antingen med flytande tvål eller Blomdahl Piercing Aftercare, rengöringsservetter – se punkt 2 ovan.
8. **Efter ca 4 veckor kan du byta till ett vanligt nässmycke.** Tvätta händer och näsans utsida noggrant. Ta försiktigt ut håltagningssmycket och sätt i ett rent nässmycke.
9. Det tar upp till ett år innan hålet är helt läkt, så tänk på följande:
 - Var aldrig utan nässmycke, eftersom hålet kan krympa och/eller växa igen.
 - Var försiktig vid byte av nässmycke. Eftersom huden som har bildats inuti hålet är tunn och skör, är det lätt att huden skadas och att det uppstår en infektion. Rengör därför nässmycke och händer innan bytet, samt fortsätt hålla rent, torrt och luftigt runt hålet.
 - Risken för att utveckla kontaktallergi är som störst under det första året. Därför bör du vara extra noggrann i ditt val av nässmycken. Vi rekommenderar hudvänliga smycken från Blomdahl – se skötselrådets baksida.



VIKTIGT! Rodnad och/eller svullnad och/eller smärta och/eller utslag kan tyda på infektion: Tag ut smycket, tvätta rent och kontakta läkare omedelbart.

Se fler frågor och svar på www.blomdahl.se

NOTERINGAR:

BLOMDAHL



TYCKER DU OM VACKRA SMYCKEN?

Det gör vi också.

Vi tycker dessutom att du ska kunna bära vackra smycken utan oro för kontaktallergier.

Och att dina barn eller barnbarn ska ha samma möjlighet.

Det är därför Blomdahl finns.

Vill man vara fin får man lida pin, sägs det. Det tycker vi är en ganska vansinnig tanke.

Varför ska man behöva riskera sin hälsa för skönhetsens skull?

Nickelallergi är en obotlig kontaktallergi som kan utvecklas när som helst i livet, till exempel om man använder smycken med nickel i.

En håltagning i näsan gör huden extra känslig och risken för allergi är som störst under det första året. I samråd med hudläkare har Blomdahl därför utvecklat bevisat snälla nässmycken som passar alla och särskilt dig som precis har tagit hål i näsan.

Att göra vackra smycken är en konst. Att göra vackra smycken som tar hänsyn till din hälsa är ännu svårare. Det kräver ambitiös produktutveckling, noggrannhet och oberoende kvalitetskontroller.

Alla klarar inte det, utan kompromissar med hudvänligheten.

Vi kommer aldrig att kompromissa. Våra smycken ska alltid vara både vackra och säkra.

Blomdahl är ett tryggt sätt att vara fin varje dag.



BLOMDAHL

www.blomdahl.se



Made in Sweden